

Rhino Clear® Mobile

Wiederaufladbare Nasendusche

S DR04P00



Nasenduse adapter
bis 3 Jahre



Nasenduse adapter von
3 bis 12 Jahren



Nasenduse adapter ab
12 Jahren



Rhino Clear® Mobile -

Wiederaufladbare Nasendusche (S-DR04P00)

Rhino Clear Mobile ist eine Nasendusche, die speziell dafür entwickelt wurde Spülen und Behandeln der Nasenhöhlen von Erwachsenen und Kindern mit Salzlösungen oder Medikamenten zur Aerosoltherapie. Einmal aufgeladen, kann die Nasendusche transportiert und verwendet werden, ohne an das Stromnetz angeschlossen zu sein und mit dem aufgeladen zu werden Ladestation bereitgestellt. Die Anwendung muss von einem Arzt verordnet werden der den Allgemeinzustand des Patienten beurteilt hat.

Rhino Clear Mobile wurde entwickelt, um wässrige Lösungen zu vernebeln zum Spülen der Nasenhöhlen und zum Sammeln der Lösung, da es fällt, in eine spezielle Sammelkammer innerhalb der Nasendusche. Es kann mit Salzlösungen (isotonisch und hypertonic) verwendet werden Lösungen, Thermalwasser) oder gesalzene Lösungen für Aerosole Therapie, wie vom Arzt verordnet. Der ergonomische Irrigator-Kompressorkörper bildet einen bequemen Griff, der mit a ausgestattet ist Knopf zur bequemen Aktivierung der Vernebelung und ist auch dabei ausgestattet mit einem Einlassventil, das das Einströmen von Luft ermöglicht und schränkt den Geräuschpegel ein.

Der Verneblerkörper hat zwei benachbarte Kammern, eine zum Aufnehmen der zu vernebelnden Lösung und die andere zum Sammeln der Lösung. Die Nasenduse adapter, die in 3 verschiedenen Größen passend zu den Nasenlöchern des Benutzers erhältlich sind, werden auf den Verneblerkörper aufgesetzt. Im vorderen Teil der Ladestation befindet sich ein spezielles Aufbewahrungsfach für Nasenduse adapter mit Schutzdeckel. Eine zweite Ausparung an der Unterseite des Sockels nimmt das Netzkabel auf.

Since 1966
FLAEM®
Medical Devices

mehr Infos unter www.scala-electronic.de



EAN 8018294009618

Art.-Nr.: 00961

CE
0051

Rhino Clear® Mobile

Wiederaufladbare Nasendusche


S DR04P00

Technische Spezifikationen

Basisspannung des Ladegeräts	230V - 50Hz
Stromverbrauch während des Ladevorgangs	2 W
Art der Gebühr	Ständig
Vernebelungskammer	15 ml max abnehmbar und komplett waschbar
Vernebelungszeit für 10 ml NaCl	ca. 2 Minuten (1 ml in ca. 12 Sekunden)
Abmessungen der Nasenspülung (Abmessungen der Ladestation)	7x6x15,5 cm (15x9x8 cm)
Gewicht der Nasenspülung	210 g
Einzelpaketabmessungen	18 x 18 x 8,5 cm
Gesamtgewicht (Ladestation komplett mit Gerät und Zubehör)	480 g

Zertifizierungen

In Übereinstimmung mit der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG	
Entspricht der europäischen Norm EN 10993-1 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten“ und der europäischen Richtlinie 93/42/EWG „Medizinprodukte“ PHTHALATE-frei. Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.	
In Übereinstimmung mit std. EN 60601-1 und EN 60601-1-11 (nur für das 230-V-Gerät mit ca. 50 Hz)	

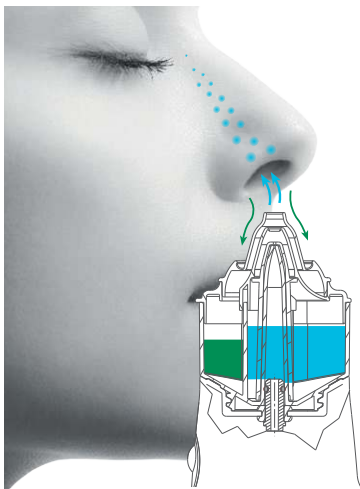

- Sekretrückgewinnungskammer
- Salzlösungskammer zum Waschen

Patentiertes, innovatives und komfortables 2-Kammer-System



Zubehör Tasse (cod. ACO409P)

Rhino Clear Mobile®

Code	DR04P00
Model	P0907EM
Umkarton	8 Stücke (28 x 28 x 20 cm)

Made in Italy

EAN 8018294009618

Art.-Nr.: 00961

mehr Infos unter www.scala-electronic.de